

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wózek toaletowy transportowy

Kod produktu: FS 692




1. Wykonanie

Wózek toaletowy transportowy wykonany jest ze stalowej, malowanej proszkowo ramy. Posiada uchylne podłokietniki umożliwiające łatwe wsiadanie i zsiadanie osobom o znacznie obniżonej sprawności ruchowej. Wyposażony w miękkie siedzisko, tapicerowane nieprzemakalnym i łatwym w czyszczeniu materiałem, cztery obrotowe koła, z których tylne posiadają hamulce, uchylne podnóżki, pojemnik sanitarny. Dzięki swojej konstrukcji można nim najeżdżać na sedes.

Zestaw zawiera: ramę wózka, siedzisko, oparcie, prawy podnóżek wraz z płytą podnóżka, lewy podnóżek wraz z płytą podnóżka, taśmę zabezpieczającą, klucz do regulacji wysokości podnóżków, pojemnik sanitarny z pokrywką.

Elementy wózka:

- a. klipsy blokujące ramę
- b. siedzisko
- c. podłokietnik
- d. sztyft blokujący
- e. podnóżki
- f. bolec montowania podnóżka
- g. hamulec zaciskowy
- h. pojemnik sanitarny

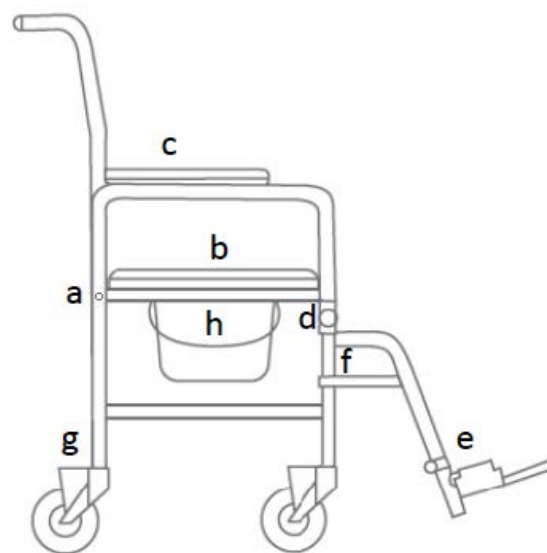

2. Zastosowanie

Wózek toaletowy transportowy jest sprzętem pomocniczym dla osób, mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Przeznaczony do korzystania wewnątrz pomieszczeń. Może być obsługiwany tylko przy pomocy osoby towarzyszącej.

Wózek pełni funkcję transportowo-toaletową dzięki wyposażeniu w pojemnik sanitarny pod siedziskiem i cztery obrotowe koła. Ma na celu ułatwienie czynności fizjologicznych użytkownika. Szczególnie zalecany dla osób mających problemy z poruszaniem się wywołanych przez:

- paraliż
- nadwagę lub chorobliwą niedowagę
- zwyrodnienia lub deformację kończyn
- zwyrodnienia czy uszkodzenia stawów
- uszkodzenie kończyn lub ich amputacje
- choroby serca i naczyń, zaburzenia krążenia

3. Montaż

Krok 1. Należy wyciągnąć klipsy blokujące znajdujące się na ramie oparcia.

Krok 2. Należy wsunąć rurki oparcia w obie tylne części ramy głównej, a następnie zablokować oparcie klipsami blokującymi.

Krok 3. Należy zamontować podłokietnik w przedniej części ramy poprzez wciśnięcie sztyftów blokujących.

Krok 4. Należy zamontować prawy i lewy podnózek w przedniej części ramy głównej osadzając je na dwóch bolcach i obracając do wewnątrz, do momentu zablokowania.

Krok 5. Należy zamontować i wyregulować taśmę zabezpieczającą na podnóżkach.

Krok 6. Pojemnik sanitarny bez pokrywki należy wsunąć z tyłu wózka w szyny znajdujące się pod siedziskiem. (Należy sprawdzić czy pojemnik został zamontowany poprawnie).

Wózek jest gotowy do użycia.

OBSŁUGA WÓZKA

- Przed każdym użyciem wózka należy sprawdzić sprawność hamulców, sprawność konstrukcyjną oraz stan kół. Należy również zwrócić uwagę na poprawność zamontowanych elementów i ich prawidłową regulację.

- Wózek nie posiada regulacji szerokości, przed rozpoczęciem użycia należy upewnić się, że szerokość wózka (45 cm) jest dostosowana do użytkownika.
- Wózek przeznaczony jest do pokonywania wyłącznie krótkich odcinków w pomieszczeniach. Wózek nie posiada amortyzatorów, dlatego jego długotrwałe używanie jest niewskazane.

Uwaga! Nie należy używać wózka w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek lub braków.

UCHYLANIE PODŁOKIETNIKÓW

- Należy wcisnąć sztyft blokujący, następnie wyjąć przednią część podłokietnika z zatrzasku i przesunąć go do dołu.
- Aby zamknąć podłokietnik, należy go przesunąć do góry i zamontować do momentu zablokowania sztyftu.
- **Nie należy** używać podłokietników jako pomocy do wstawania. W razie potrzeby należy wezwać osobę do pomocy.

HAMULCE

- Aby zablokować koła należy docisnąć stopą dźwignię lewego i prawego hamulca. Aby odblokować koło należy podciągnąć dźwignię stopą do góry.

PODNOŻKI

- W momencie wsiadania na wózek i zsiadania z wózka płyty podnóżków powinny być ustawione pionowo. **Nie należy wykorzystywać podnóżków do podpierania się w czasie czynności wsiadania i zsiadania, ze względu na ryzyko przechylenia się wózka i upadku.**

WSIADANIE NA WÓZEK

- W trakcie wsiadania, zsiadania, zmiany pozycji użytkownika, postoju należy bezwzględnie zablokować hamulce.

- Wózek powinien być ustawiony jak najbliżej miejsca przesiadania, tak by stykał się z łóżkiem lub innym używanym siedziskiem, tylnym kołem i przednim elementem ramy. Jeżeli użytkownik nie jest w stanie przesiąść się samodzielnie, należy przenieść użytkownika na wózek.
- W wózku należy usiąść maksymalnie głęboko, po środku siedziska, aby zapobiec niestabilności produktu.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	55cm
Szerokość wewnętrzna	45 cm
Głębokość całkowita	87 cm
Wysokość siedziska od podłoża	53 cm
Wysokość całkowita	95 cm
Wymiary siedziska	44 x 44 cm
Waga	10,6 kg
Maksymalne obciążenie	100 kg
Wymiary po złożeniu	55 cm
Kolor ramy	biały

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe poruszanie się na wózku, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Należy systematycznie dokonywać konserwacji elementów wózka:

- Tapicerka i poduszka może być czyszczona wodą zimną lub ciepłą przy pomocy zwilżonej (nie mokrej) szmatki oraz bez użycia

detergentów. Trudniejsze plamy należy czyścić przy użyciu gąbki. Przy konserwacji tapicerki należy zwrócić uwagę aby jej nadmiernie nie namaczać. Należy suszyć z dala od źródeł ciepła.

- Elementy z tworzywa sztucznego należy czyścić zwilżoną szmatką, ewentualnie z wykorzystaniem środków do czyszczenia tworzyw sztucznych. Należy przy tym postępować zgodnie z instrukcją Producenta oraz zasadami bezpieczeństwa przy wykorzystaniu detergentów.
- Po każdorazowym użyciu należy opróżnić i zdezynfekować pojemnik oraz deskę siedziska. Należy wykorzystywać środki do czyszczenia toalet zgodnie z zaleceniami ich producenta.

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.
Dowiedz się więcej na: **www.timago.com**
Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021