

FootWave™ LADY PREGNA

ZMĘCZONE STOPY CIĄŻĄ, STOPA WRAŻLIWA

FOOTWave™



OPIS PRODUKTU:

Absolutną prawdą jest, że ciąża to nie choroba. Jednakże, jest to okres wzmożonego obciążenia i wysiłku dla naszego organizmu, co często przekłada się na dolegliwości stóp. Dodatkowo, to właśnie wtedy my, kobiety, mamy wrażenie, jakby stopa nam urosła! Przystajemy się mieścić w ulubione buty a stopy bolą. W rzeczywistości stopy nie rosną w ciąży - one "rozpłaszczają" się. W okresie ciąży kobiety mają zwiększoną wiotkość więzadłową. Łuźniejsze więzadła mają problem z utrzymaniem stóp w prawidłowej pozycji, szczególnie przy zwiększonej wadze. W efekcie to wtedy pojawia się pogłębione płaskostopie i często wtedy rozpoczynają się problemy z haluksami.

Dynamiczne wkładki ortopedyczne FootWave™ LADY PREGNA to pierwsze w Polsce wkładki dedykowane dla kobiet w ciąży! Ich zadaniem jest przywrócenie opadniętych łuków podszwowych dzięki specjalnie wyprofilowanemu łukowi podszwovemu. Dodatkowo stanowią świetną profilaktykę przeci haluksom oraz wspierają ich leczenie, gdy te już występują - odpowiada za to specjalny amortyzator pod dużym palcem.

DOBÓR I CZYSZCZENIE WKŁADEK:

Wkładki FootWave mogą zostać przycięte w celu dopasowania rozmiaru do obuwia. Usuń fabryczne wkładki z butów przed włożeniem wkładek FootWave. Przyzwyczajaj stopy do wsparcia ich łuków używając wkładek przez kilka godzin dziennie, stopniowo zwiększając czas używania, aż do osiągnięcia pełnego komfortu. Wkładki można czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki nasączonej mydłem. Nie należy ich moczyć, wkładać do pralki, suszarki oraz suszyć na kaloryferze.

ZAOPATRUJĄC SIĘ WE WKŁADKI FOOTWAVE™ LADY PREGNA:

- 1 POCZUJESZ ULGĘ W BÓLU STÓP, KOLAN, BIODER, PLECÓW**
Specjalna budowa utrzymuje prawidłową pozycję stóp i wspiera prawidłowe ustawienie ciała.
- 2 ZATRZYMASZ DAJSZY ROZWÓJ PŁASKOSTOPIA LUB NIE DOPUŚCISZ DO JEGO WYSTĄPIENIA**
Wkładki usuwają przede wszystkim przyczynę powstawania problemu - kontrolują nadmierną pronację stopy (koślawość), stabilizują piętę, przywracają prawidłową ruchomość stawu skokowego dolnego oraz mobilizują ruchomość pierwszego promienia (palucha).
- 3 ZMNIJSZYSZ RYZYKO POWSTANIA HALUKSÓW**
Dbając o prawidłowe odciążenia i ustawienie oraz redukując ryzyko płaskostopia wkładka zabezpiecza duże palce przed wykoślawieniem.
- 4 ODCIĄŻYSZ I ZAMORTYZUJESZ**
Odpowiedni dobrane amortyzatory: podwójny tyłostopia, przodostopia i dużego palca zadbać o Twoją wygodę!

TABELA ROZMIARÓW:

EXTRA SMALL XS	SMALL S	MEDIUM M
35 - 38	39 - 41	42 - 43

LINK DO TEGO PRODUKTU: <https://footwave.pl/wkladki-ortopedyczne/footwave-lady-pregna>

KUP ONLINE

DANE KONTAKTOWE

+48 506 310 411
info@footwave.pl
www.footwave.pl

PUNKTY SPRZEDAŻY

footwave.pl/kontakt

PRZEDAWACIELE

footmedical.pl/kontakt

PRODUCENT I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

www.footmedical.pl
biuro@footmedical.pl


SOCIAL MEDIA

/FootWavePL
/footwave_wkladki_dynamiczne


JAK DZIAŁA WKŁADKA FootWave™ LADY PREGNA

FOOTWave™

WIERZCH

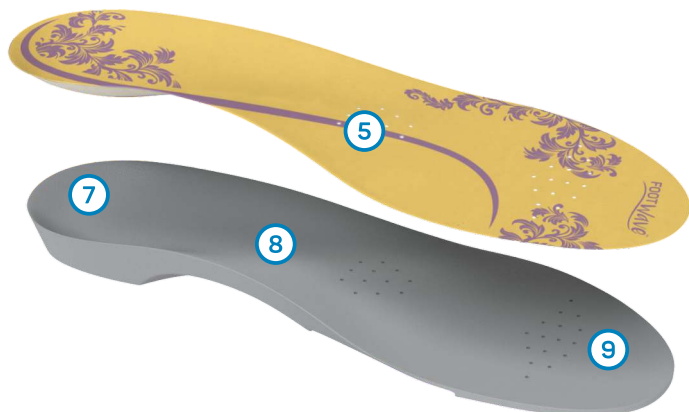

SPÓD

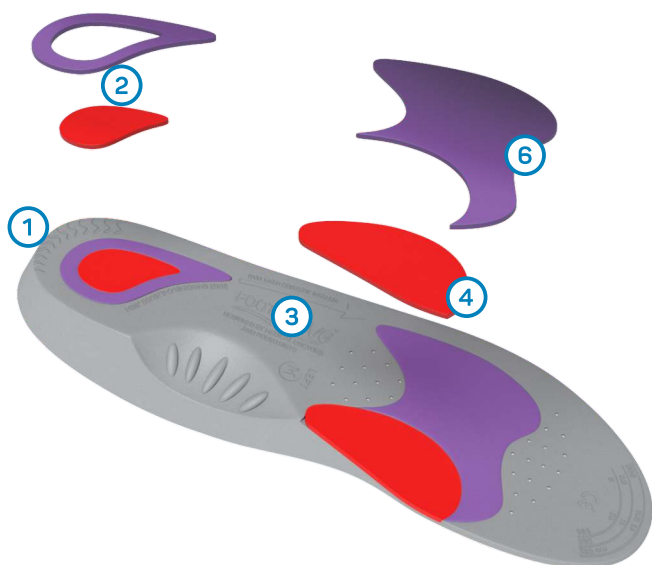

ELEMENT WKŁADKI	FUNKCJA	CO TO OZNACZA?
1 ŻŁOBIENIA (NACIĘCIA) SPODU TYŁOSTOPIA	Zwiększenie przyczepności podeszwowej części tyłostopia wkładki	Dzięki żłobieniom wkładka lepiej przylega do obuwia i nie porusza się w nim w sposób niekontrolowany
2 PODWÓJNY AMORTYZATOR KIERUNKOWY TYŁOSTOPIA	Absorbcja wstrząsów tyłostopia, kontrola ruchu 3D stawu skokowego, wprowadzenie w prawidłową supinację	Zmniejszy się ból pięty, a stopy będą poruszać się we właściwych kierunkach i zakresach ruchu
3 PŁASKI SPÓD WKŁADKI (PLATFORMA PODESZWOWA)	Stabilizacja, wyeliminowanie niekontrolowanej rotacji	Wkładki nie będą przekreślać się w obuwiu w sposób niekontrolowany podczas chodu, dzięki czemu korekcja i wsparcie będzie zawsze prawidłowe
4 PELOTA ORAZ 5 OBNIŻENIE POD HALUKSEM	Amortyzacja i obniżenie głowy stawu śródstopno-paliczkowego pierwszego promienia (MTP-1)	Amortyzacja zmniejszy ból i dyskomfort, a obniżenie stawu sprawi, że palec będzie prawidłowo się poruszał
6 AMORTYZATOR PRZODOSTOPIA	Amortyzacja głów kości śródstopia	Miękka pelota działa jak poduszka - zwiększy komfort poruszania się oraz zapobiegnie tworzeniu się odcisków (modzeli) w tym miejscu
7 GŁĘBOKIE, PROFILOWANE KORYTKO PIĘTOWE	Prawidłowe ustawienie osi kończyny dolnej w pozycji neutralnej, stabilizacja, wyeliminowanie niekontrolowanej rotacji	Twoje stopy nie będą przekreślać się w trakcie poruszania, a nogi będą pracować w prawidłowych osiach (nie będą się koślawić / szpotawić, pięty nie będą "uciekać" na zewnątrz / do wewnątrz)
8 PODPARCIE ŁUKÓW PODESZWOWYCH	Wsparcie dla struktur anatomicznych stopy (odciążenie rozciągniętego podeszwowego)	Twoje łuki podeszwowe (podłużny i poprzeczny) będą prawidłowo wysklepione, dzięki czemu stopy będą mniej się męczyć i pracować prawidłowo
9 MATERIAŁ WaveEVA 450B	Optymalny poziom twardości, amortyzacji oraz pożądany współczynnik odkształcenia	Zmniejszy się ból Twoich stóp, szczególnie pięty, zwiększy się komfort poruszania się oraz stabilność

LINK DO TEGO PRODUKTU: <https://footwave.pl/wkladki-ortopedyczne/footwave-lady-pregna>

 KUP ONLINE

DANE KONTAKTOWE

+48 506 310 411
info@footwave.pl
www.footwave.pl

PUNKTY SPRZEDAŻY

footwave.pl/kontakt

PRZEDAWACIELE

footmedical.pl/kontakt

PRODUCENT I WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR

www.footmedical.pl
biuro@footmedical.pl

SOCIAL MEDIA

/FootWavePL
/footwave_wkladki_dynamiczne